

caviX

Lo más avanzado
en modelación

ECLERIS 

Un tratamiento modelador, eficaz y totalmente indoloro

Cavix es un método eficaz para destruir las masas adiposas localizadas que consiste en un tratamiento no invasivo basado en el sistema de cavitación. Ofrece resultados notables en aquellas zonas que no puede reducirse ni con dietas ni con ejercicio.

¿Por qué la cavitación reduce hasta los depósitos grasos localizados más resistentes y difíciles de modelar?

La cavitación es un método que, a partir de la emisión de ondas ultrasónicas, provoca una alternancia de presión y descompresión sobre las células adiposas hasta hacerlas explotar.

Cavix, la mejor respuesta a las exigencias de la estética.

Cavix es un modelador del cuerpo con el que se obtienen excelentes resultados en pocas sesiones porque utiliza bajas frecuencias. Así logra llegar a los panículos adiposos más profundos, al contrario de los sistemas que al aplicar altas frecuencias no logran penetrar más allá de la zona superficial. Cavix al manejar un rango que oscila entre los 36 y los 44 KHz, (alternancia de presión y descompresión entre 36.000 y 44.000 veces por segundo) asegura que ataca el origen del problema. Además, es altamente recomendable para realizar retoques luego de una liposucción y corregir asimetrías, perfeccionando aún más el modelado de la cirugía.



Cavix, un tratamiento tan eficiente como suave en su aplicación.

La ondas emitidas por Cavix solo afectan a los adipocitos por sus características de tamaño y composición, ya que son células no elásticas y, por lo tanto, fácilmente eliminables. Este sistema no daña ni los vasos sanguíneos ni los linfáticos adyacentes por tener diferente consistencia y elasticidad.

Cavix también trabaja sobre la celulitis

Una de las características más destacables que proporciona el tratamiento es su acción contra la celulitis. La cavitación tiene la capacidad para estimular la circulación sanguínea y la generación de un nuevo colágeno que, consecuentemente, mejorará también el aspecto de la piel con celulitis. La destrucción de las células adiposas reduce la consistencia del colágeno cuando éste es muy esclerótico, como es el caso de los nódulos celulíticos.



Sumamente simple


1. La aplicación de Cavix no requiere anestesia ni preparación previa, y permite volver a la vida normal inmediatamente después del tratamiento.
2. Se aplica entre 7 y 10 minutos por área de 10 x 10 cm, en forma de masaje circular, con movimientos lentos y en un máximo de 3 áreas contiguas.

Especificaciones

El equipo permite controlar el tiempo de aplicación mediante un timer y cuenta con la función SWEEP, el mecanismo que permite variar el plano de impacto de la onda para realizar la cavitación desde distintos perfiles, alcanzando la mayor cantidad posible de células adiposas.

Cavix produce una cavitación de RANGO VARIABLE, con una frecuencia que oscila entre los 36 y los 44 KHz y un nivel adecuado de gran potencia. El transductor está sincronizado en dicho rango de barrido, garantizando el efecto de cavitación, cualquiera sea la consistencia de tejido adiposo (adiposidad compacta, fibrosa, edematosa o laxa).

3. Se recomienda dejar pasar un período de entre 10 y 15 días entre sesiones, una semana como mínimo, cumpliendo un total de entre 5 y 12 aplicaciones según el caso.

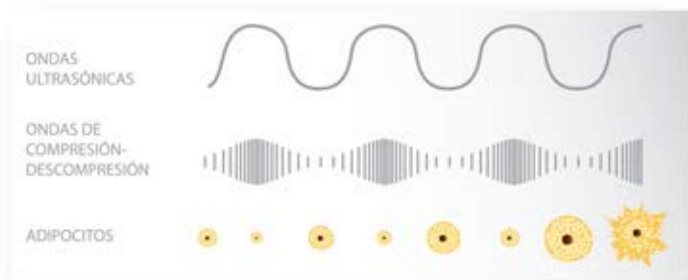

Abdomen
(lateral y central)



Los resultados más satisfactorios en zonas más difíciles

caviX



ECLERIS 
INNOVATION VALUE

www.ecleris.com
info@ecleris.com

Ecleris se reserva el derecho de modificar este producto sin previo aviso.