



SISTEMA ÚNICO EN ARGENTINA

# BIMAX

NOTO DESARROLLÓ EL PRIMER EQUIPO  
CON SISTEMA DE RF BIPOLAR RESISTIVA REAL.



#### TRANSMITTER CONTROL.

Este exclusivo sistema de seguridad  
te indica al profesional la forma  
en que se activan los emisores.

**2** AÑOS DE  
GARANTÍA  
**+CAPACITACIÓN**

#### SISTEMA ÚNICO DE RF RESISTIVA REAL.

El equipo BIMAX (Bipolar Real) cuenta con 2 emisores de R.F. y un receptor en su cabezal facial y se duplica en su cabezal corporal. A través de su emisión continuo o pulsante, permite al profesional lograr la temperatura adecuada para cada tratamiento.

La emisión de los equipos NOTO generan la temperatura necesaria para calentar las capas subcutáneas y la matriz extracelular, donde las fibras de colágeno y elastina se encuentran incrustadas.

El equipo BIMAX genera tratamientos eficaces y seguros con resultados inmediatos y duraderos en la firmeza y tensado de la piel, la definición del contorno corporal, el rostro, etc.

Su aplicación también mejora el aspecto del P.E.F.E., debido a que los tejidos grasos ejercen mayor resistencia al pasaje eléctrico.

¡BIENVENIDO A LA TECNOLOGÍA! BIENVENIDO A NOTO.


**NOTO**  
TECNOLOGIA PARA CONFIAR



Con el lanzamiento de la línea de radiofrecuencia de NOTO se plantea un rumbo diferente en la estética, un nuevo escenario en donde la combinación de terapias, la incorporación de tecnología de punta y la utilización de materiales y productos de primera calidad, son fundamentales para la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos.

### ¿CÓMO FUNCIONA ESTE NOVEDOSO SISTEMA?

Debido a la cantidad y ubicación de sus emisores conjuntamente con el receptor, ambos realizados en acero quirúrgico inoxidable, se obtiene una mayor concentración de potencia y energía focalizada en la zona de aplicación deseada. Al poseer emisión de campos cruzados, desarrollada por Noto, los niveles de temperatura alcanzan entre 55° y 58° C. en forma local y profunda. Esta focalización de energía logra una contracción inmediata de las fibras de colágeno y elastina, aumentando su desnaturalización. La temperatura alcanza a nivel superficial es entre 36° y 42° C.

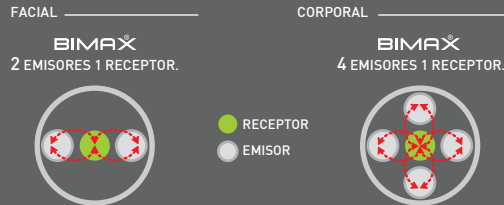

### SISTEMA "ID" (IMPEDANCE DETECTOR)



Un sistema inteligente desarrollado por NOTO le indica al profesional mediante una señal lumínica que el circuito electrodo-paciente se ha cerrado correctamente y el equipo está emitiendo en forma correcta permitiendo realizar el tratamiento en forma segura.

### LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD.

En su pantalla "touch-screen" se informan todos los parámetros de control de tiempo, potencia, frecuencia, tipo de emisión y horas de uso entre otras posibilidades.




### BIMAX EQUIPO IPX 0

FABRICADO POR:	NOTO GROUP S.A.
PAÍS:	ARGENTINA
NOMBRE DEL PRODUCTO:	BIMAX
ANCHO:	350 MM
LONGITUD:	310 MM
ALTURA:	160 MM
PESO:	4.6 KG.
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	98 A 240 VAC 50/60HZ120
CONSUMO:	90 VA
POTENCIA:	60 Watt (Corporal) 30 Watt (Facial)
FUSIBLE:	1 AMPER CORTE RÁPIDO
FUNCIONAMIENTO:	MICROCONTROLADOR
FRECUENCIA:	1 MHZ +/- 10%
PANTALLA :	GRAFICA TÁCTIL DE 128X64
FUENTE:	SWITCHING INTERNA
TECNOLOGÍA:	SMD
CONTROL DE TIEMPO:	POR PROGRAMA
FUSIBLE DE ENTRADA TIPO:	F 1.5 AL 250 VF 1
FUSIBLE DE ENTRADA EMISOR:	AL 250 V

BIMAX	
CANTIDAD DE EMISORES:	2
CANTIDAD DE RECEPTORES:	1

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PUEDEN VARIARSI PREVIAMENTE AVISO.

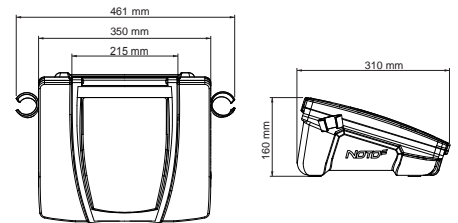

**BIMAX**

Noto respalda a todos sus clientes con un conjunto de herramientas disponibles en todo momento.

Herramientas como capacitación, servicio técnico post venta y repuestos asegurados. Todo esto con el objetivo de lograr que los equipos Noto sean siempre su mejor opción

#### OTROS EQUIPOS DE LA LINEA N DE NOTO:

**TRIMAX** - RADIOFRECUENCIA RESISTIVO MULTIPOLAR.

**N 1800** - ELECTROPORACIÓN DE ALTA POTENCIA + MICRODERMOABRASIÓN.